



הוראות הפעלה למשקל דיאגנוסטי

מודד אחוזי שומן, נוזלים, מסת שריר, עצם ושריפת קלוריות יומית



מס' דגם 10015108

יבואן: מ. פיינגרש ושות' בע"מ,

רח' דותן 2, יבנה, טל. 03-5581666

יצרן: סירקל אלקטרוניק, סין.



המרכז למוצרים רפואיים ואורטופדיים

תודה שבחרתם במוצר שלנו.
על מנת לוודא הפעלה נכונה ושמירה על אורך החיים ועל דיוק
המשקל קראו היטב את מדריך למשתמש לפני השימוש.

תכונות

- ★ הפעלה אוטומטית בדריכה
- ★ תחום מדידה עד 150 ק"ג
- ★ זכרון ל-10 משתמשים
- ★ מתאים לטווח גילאים מ-10 עד 80
- ★ טווח גובה מ-100 ס"מ עד 240 ס"מ
- ★ סוללה חלשה יוצג "LO"
- ★ כיבוי אוטומטי
- ★ מקור מתח: שתי סוללות ליתיום CR2032

כפתורי שליטה



כפתור הפעלה/כיבוי/בחירת התפריט	SET
למעלה	▲
למטה	▼


מקרא צג משקל



Fat	שומן	kg	קילוגרם
TBW	נוזלים בגוף	%	אחוזים
	מסת שריר		גבר
	מסת עצם		גבר אתלטי
KCAL	קלוריות		אשה
BMI	מדד מסת גוף		אשה אתלטית
Age	גיל	PG	מספר משתמש 0-9
cm	סנטימטר		

הוראות הפעלה

לפני השימוש הראשוני יש להסיר את פס הבידוד בין הסוללה לגוף המשקל.
יש להניח את המשקל על רצפה קשיחה ושטוחה (לא על גבי שטיח).

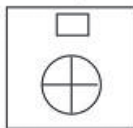

להדלקת המשקל יש לעמוד במרכז המשקל עם שתי הרגליים.



פרופיל משתמש

כדי לקבל מידע על משקל, אחוז שומן, אחוז מים, אחוז שריר ואחוז עצם בגוף, יש להכניס נתונים אישיים.

כוון מס' משתמש

לחץ על כפתור SET, לחץ על כפתור ▲ או ▼ כדי לבחור מס' משתמש, בסיום הכוון לחץ על כפתור SET לאישור.



כוון מין משתמש


לחץ על כפתור ▲ או ▼ כדי לבחור את מין המשתמש,



לבחירת גבר ו- לבחירת אישה.
ספורטאי ספורטאית
בסיום הכוון לחץ על כפתור SET לאישור.

כוון גיל משתמש

לחץ על כפתור ▲ או ▼ כדי לבחור גיל משתמש, בסיום הכוון לחץ על כפתור SET לאישור.

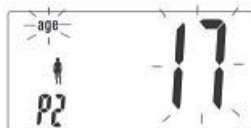


כוון גובה משתמש

לחץ על כפתור ▲ או ▼ כדי לבחור גובה משתמש, בסיום הכוון לחץ על כפתור SET לאישור.



הוראות שימוש

1. בחר את מספר המשתמש שלך בזיכרון (P9-P0)
2. לאחר קביעת מספר המשתמש יש ללחוץ על כפתור SET עד לקבלת 0.0 על הצג.
3. עמוד על המשקל ברגליים יחפות. הקפד למקם את כפות הרגליים על פסי המתכת הכסופים.
4. משקלך יופיע בצג.
5. לאחר תצוגת משקלך יופיעו הנתונים הבאים

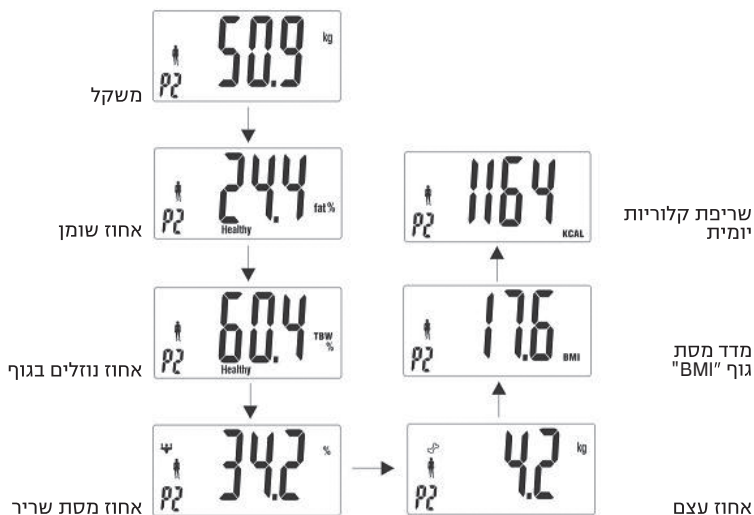

הנתונים האישיים יאוחסנו בזכרון המשקל, כך שבשימוש הבא יש צורך רק להכניס את מספר המשתמש שלך (P9-P0) והנתונים שלך יופיעו בצג ללא צורך להכניסם בשנית.

במידה ורוצים רק להשקל, יש לעמוד על המשקל ותוצאת המשקל תופיע על הצג.

אחוזי מים בגוף

גיל	גבר	אשה	תוצאה	
<=30	66.0-60.5%	66.0-59.9%	Optimal Hydration	
	60.4-57.1%	59.8-56.4%	Slight Dehydration	
	57.0-53.6%	56.3-53.0%	Moderate Dehydration	
	53.5-50.2%	52.9-48.6%	Dehydration	
	50.1-37.8%	48.5-37.8%	Severe Dehydration	
>30	66.0-59.1%	66.0-55.0%	Optimal Hydration	
	59.0-55.7%	54.9-51.6%	Slight Dehydration	
	55.6-52.3%	51.5-48.1%	Moderate Dehydration	
	52.2-48.8%	48.0-44.7%	Dehydration	
	48.7-37.8%	44.6-37.8%	Severe Dehydration	

אחוזי עצם בגוף

אשה			
Body Weight	Below 45 kg	45-60kg	Over 60kg
Bone	>1.8kg	>2.2kg	> 2.5kg
גבר			
Body Weight	Below 60 kg	60-75 kg	Over 75 kg
Bone	>12.5 kg	>2.9 kg	> 3.2 kg

אחוז שומן בגוף

גיל	אשה			
	Body fat percentage			
	תת משקל	בריא	השמנה	השמנת יתר
12-20	<18%	18-28%	28-33%	>33%
21-42	<20%	20-30%	30-35%	>35%
43-65	<21%	21-31%	31-36%	>36%
66-80	<22%	22-32%	32-37%	>37%

Age	גבר			
	Body fat percentage			
	תת משקל	בריא	השמנה	השמנת יתר
12-20	<15%	15-21%	21-26%	>26%
21-42	<17%	17-23%	23-28%	>28%
43-65	<18%	18-24%	24-29%	>29%
66-80	<19%	19-25%	25-30%	>30%

אחוז שריר בגוף


	גיל	נמוך	תקין	גבוה	גבוה מאוד
אשה	18-39	< 24.3	24.3-30.3	30.4-35.3	>35.4
	40-59	< 24.1	24.1-30.1	30.2-35.1	>35.2
	60-80	< 23.9	23.9-29.9	30.0-34.9	>35.0
גבר	18-39	< 33.3	33.3-39.3	39.4-44.0	>44.1
	40-59	< 33.1	33.1-39.1	39.2-43.8	>43.9
	60-80	< 32.9	32.9-38.9	39.0-43.6	>43.7

אזהרות

- החלף סוללה כאשר בתצוגה מופיע "LO"



- ERR יופיע בתצוגה במצב של משקל יתר

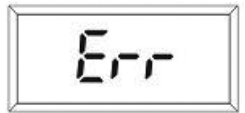

- אסור בשימוש לבעלי קוצב לב.
- וודא שמשטח הזכוכית יבש כדי להמנע מהחלקה.
- לניקוי המשטח יש להשתמש במטלית רכה ואלכוהול או חומר לניקוי חלונות.
- המשקל נועד לשימוש ביתי בלבד ולא למסחרי.
- אינו מדויק לאנשים שעברו השתלה של חלקים מתכתיים בגוף.
- מומלץ לבצע מדידה בשעה קבועה כל יום על מנת להבטיח דיוק מירבי.
- על מנת לקבל את כל הנתונים יש לעלות על המשקל ברגליים יחפות ולהקפיד על מגע בין פסי המתכת הכסופים לכף הרגל.
- יש להשקל כאשר כפות הרגליים יבשות.
- אין ללחוץ על כפתורי ההפעלה עם כף הרגל במהלך השקילה.



יבואן: מ. פיינגרש ושות' בע"מ
רח' דותן 2, יבנה
טל. 03-5581666 פקס: 03-5581465

תעודת אחריות מס'

תאריך קנייה: _____

למכשיר _____ דגם _____ מס' _____

1. ניתנת בזאת אחריות המפורטת להלן לתקופה של שנה מיום קניית המוצר.
תעודת האחריות בתוקף רק בצרוף חשבונית מס עם תאריך הקניה
2. האחריות מוגבלת לתיקון או החלפה ללא תשלום של כל חלק במוצר אשר יראה לנו פגום
ואשר לפי שיקול דעתנו נגרם כתוצאה מפגם בייצור.
3. האחריות לא תחול במקרים הבאים:
א. קלקול שנגרם שלא בהתאם להוראות השימוש.
ב. שבר או תקלה שנגרמו כתוצאה מרשלנות או הזנחת המוצר או נזקים עקב גורמים חיצוניים.
ג. טיפול, שינוי או תיקון כלשהו אשר נעשה ע"י מי שלא הוסמך על ידנו.
אין האחריות כוללת חלקים מתכלים.
4. תנאי מוקדם למימוש האחריות הוא הבאת המוצר בשלמותו אלינו, תוך 7 ימים מיום גילוי
הליקוי ו/או הפגם בצרוף תעודת זו, כאשר היא מלאה וחתומה ע"י המוכר וכי הספח המצ"ב
ישלח אלינו תוך 10 ימים ממועד הרכישה.

תעודת אחריות מס'

למכשיר _____ דגם _____ מס' _____

לתקופה של שנה מיום קניית המוצר תאריך קנייה: _____

שם הקונה: _____ כתובת: _____ טל': _____

שם המוכר: _____ חתימה: _____ מס' חשבונית: _____

יש לשלוח ספח זה לחברת מ. פיינגרש ושות' בע"מ, רח' דותן 2, יבנה, טל. 03-5581666

אנא מלא כרטיס זה ושלח אלינו כדי לעזור לנו לתת לך את השירות הטוב ביותר

ניתן לרשום תעודת אחריות דיגיטלית באתר החברה www.mfcl.co.il