


MASTER Comfort

Stöd och positionering

Användarvägledning



STÖDKIL

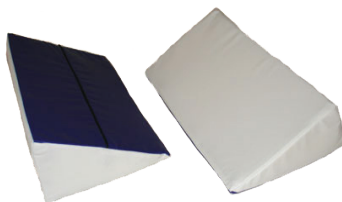

MAGKIL



RYGGKIL



AVLASTNINGSKUDDE



CYLINDERKIL



ZIGZAG-KIL




När mobiliteten minskar...



...förbereder vi livskvaliteten!

Vare	Art no.	Produktbetegnelse	Model	Størrelse	Vægt
	MC 001-8040	Master Comfort stödkil 2 stk.		L 40 x B 15 x H 5 cm	280 g
	MC 001-8041	Överdrag till stödkil 2 stk.		L 40 x B 15 x H 5 cm	100 g
	MC 001-8035	Master Comfort Magkil - 30	30	L 30 x D 25 x H 14 cm	500 g
	MC 001-8036	Överdrag till Master Comfort Magkil - 30	30	L 30 x D 25 x H 14 cm	80 g
	MC 001-8050	Master Comfort Magkil	Kort	L 43 x B 25 x H 14 cm	540 g
	MC 001-8051	Överdrag till Magkil	Kort	L 43 x B 25 x H 14 cm	82 g
	MC 001-8060	Master Comfort Magkil	Lång	L 60 x B 25 x H 14 cm	660 g
	MC 001-8061	Överdrag till Magkil	Lång	L 60 x B 25 x H 14 cm	110 g
	MC 001-8070	Master Comfort Ryggkil	Kort	L 30 x B 30 x H 25 cm	720 g
	MC 001-8071	Överdrag till Ryggkil	Kort	L 30 x B 30 x H 25 cm	140 g
	MC 001-8075	Master Comfort Ryggkil	Lång	L 60 x B 30 x H 25 cm	1360 g
	MC 001-8076	Överdrag till Ryggkil	Lång	L 60 x B 30 x H 25 cm	220 g
	MC 001-8080	Master Comfort Avlastningskudde		L 50 x Ø 15 cm	400 g
	MC 001-8025	Master Comfort cylinderkil	Kort	L 30 cm Ø 15 cm	240 g
	MC 001-8030	Master Comfort cylinderkil	Lång	L 100 cm Ø 15 cm	900 g
	MC 001-P601	Master Comfort Zigzag-kil		L 180 x B 30 x H 10 cm	1860 g

MASTER Comfort Stödkilar och positioneringskuddar

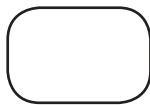

A. Placering av Stödkilar



1A) Brukaren brukaren sitter upp i säng och har behov av lite stöd för överkroppen. Stödkilarna placeras från skulderblad och neråt på var sida.



2A) Stödkilarna kan med fördel placeras under brukaren lår. Botten är försedd med antiglid och ligger därför stabilt på underlaget.



B. Placering af magkil



1B) Brukaren ligger på sida och har behov av stöd framifrån. Magkilen placeras således ut från magpartiet och gärna lite in under brukarens mage för att stabilisera brukaren i sidled.



C. Placering af Ryggkil



1C) Brukaren ligger på sida. Ryggkilen placeras bak vid brukarens rygg. Antiglidet på kuddens undersida gör att Ryggkilen ligger stabilt mot underlaget.

MASTER Comfort Stödkilar och positioneringskuddar



D. Placering av positioneringskuddar



1D) Brukaren sitter upp i sängen. För att förhindra brukaren att glida ut till sidan placeras en positioneringskudde ner längs brukarens överkropp eventuellt på bägge sidor.



2D) Brukaren ligger på rygg och positioneringskudde placeras under knä för att förhindra översträckning av benen.



3D) Brukaren sitter i rullstol. För att förhindra brukarens knän ligger mot varandra placeras positioneringskudden mellan brukarens knä.



E. Placering av cylinderkil



1E) Brukaren sitter upprest i sängen. För att förhindra brukaren att glida ut i sida placeras cylinderkilen ned längs brukarens överkropp eventuellt på bägge sidor.



2E) Brukaren ligger i ryggläge. Cylinderkilen placeras under knäna, så översträckning av benen undviks.



3E) Brukaren sitter i rullstol. För att förhindra brukarens knän ligger mot varandra placeras Cylinderkilen mellan brukarens knä.



F. Placering af zigzag-kil



1F) Brukaren ligger på sida och har behov av stöd på hela baksidan av kroppen. Zigzag-kilen placeras från brukarens huvud och ner efter längs kroppen.



2F) Brukaren ligger på sida och har behov av stöd på framsidan av kroppen. Zigzag-kilen placeras således så att brukaren kan stödja sin arm på kilens övre del. Zigzag-kilens nedre del lägges mellan brukarens ben och säkrar därmed optimalt stöd i sidled.

MASTER Comfort

Tvättanvisning

Master COMFORT överdrag, positioneringskudde och cylinderkil kan tvättas i 80 grader C



Vid tvätt av överdrag skall blytlås stängas helt. Tvättas med fördel i tvättpåse.



VARNING

Skölj och Blekmedel får inte användas

Produkterna kan också avtorkas med sprit

Fördelar

Stöd-, Mag- och ryggkilar

- Unika stödegenskaper
- Formar sig efter kroppen
- Skummet återgår till sitt ursprung efter användandet
- Har glidsäkert material på undersida
- Tvättbart avtagbart överdrag
- överdrag kan köpas separat
- Kan desinficeras med sprit
- Lång hållbarhet

Cylinderkil och Positioneringskudde

- Innehåller äkta Micro Krögerkylor som inte plattas ihop
- Utjämnar tryck
- Kan formas efter behov
- Kan maskintvättas
- Kan desinficeras med sprit
- Lång hållbarhet



Viktigt

- Se till att Master CARE hjälpmedel är intakt med frekvent eftersyn.
- Om detta hjälpmedel har kritiskt slitage eller på annat sätt har skador, skall det inte användas.
- Är du osäker på ditt hjälpmedel skall du omgående kontakta din återförsäljare eller Master CARE.



ANSVAR

- Används detta hjälpmedel felaktigt eller olämpligt påtager Master CARE sig inte ansvaret för olyckor som medför allvariga personskador.

Stöd och positionering

Produktbeskrivning

Stöd, Mag och Ryggkilar

Kilarna består av positionerings och stöd kuddar i Viscoelastiskt skum. Ryggkilen har en kärna av PU-skum som är belagd med 50mm Viskoelastiskt skum som är temperatur-följsam-, formar sig efter kroppen och ger brukaren fullkomligt stöd utan mottryck. När kroppen avlägsnar sig från kilen, upprättar sig skummet till sitt ursprung. Kilarna är försedda med avtorkbart och tvättbara överdrag, dessa är även flammhämmande, elastiskt och läck-tätt PU-belagt polyester. Överdraget vidare försedd med glidsäkert material på undersidan som verkar så att kilarna ligger stabilt på underlaget. Överdrag kan köpas separat.

Cylinderkil och Positioneringskuddar

Leveraras i flammhämmande material andningsbart elastiskt PU belagt polyester. Kilar/Kuddarnas innehåll har äkta mikro Krögerkylor, dessa plattas inte samman utan behåller sin runda form under lång tid och dessa har därmed lång livstid. Kan maskintvättas i 80 grader C..

Zigzagkil

Zigzag-kilen består av en positionerings och stödkudde. den levereras i flammhämmande, andningsbart, elastiskt PU belagt polyester.

Zigzag-kilen innehåller flammhämmande antistatiska flamingokylor, dessa plattas inte samman och ger därmed lång livstid. Överdrag kan köpas separat. Kan tvättas. Ökar komforten i förbindelse med positionering.

Användning

Stödkilar

Stödkilarnas placeras från skulderbladen och neråt och ger därmed ett stöd för brukaren i sittande ställning. Stödkilarna kan också användas i samband med positionering i liggande ställning.

Magkil

Magkilen ger unik avlastning och stöd under magen samt bakiom ryggen när brukaren ligger på sida. Magkilen kan med fördel placeras under brukarens mage innan brukaren vänds på sida. Används Magkilen som stöd för ryggen kan den med fördel placeras mellan ryggen och sänggrinden samt under lakanet eller Master Turner, varefter brukaren förflyttas försiktigt in mot magkilen.

Ryggkil

Ryggkilen ger en unik avlastning och stöd för ryggen när brukaren ligger på sida. Placeras med fördel mellan brukaren och sänggrinden varefter brukaren förflyttas försiktigt mot ryggkilen.

Cylinderkil och Positioneringskudde

Cylinderkil och Positioneringskudde kan formas efter brukarens behov och ger bland annat en unik avlastning samt förebygger tryck. Dessa kan användas till att stödja ryggen, nacke och stöd kroppen i liggande ställning. Positioneringskudden används vidare till stöd på framsida av kroppen, mellan och under knän.

Zigzag-kil

Zigzag-kilen kan användas både framför och bakom brukaren som ger därmed möjlighet att få fullt stöd längs hela kroppen.